


CAPTURA DE MATERIAL PARA TRAZABILIDAD



QUIRÓFANOS DEL
HOSPITAL MALVA-ROSA

Paso 1- Se entra con usuario () y con la contraseña de administrador ()

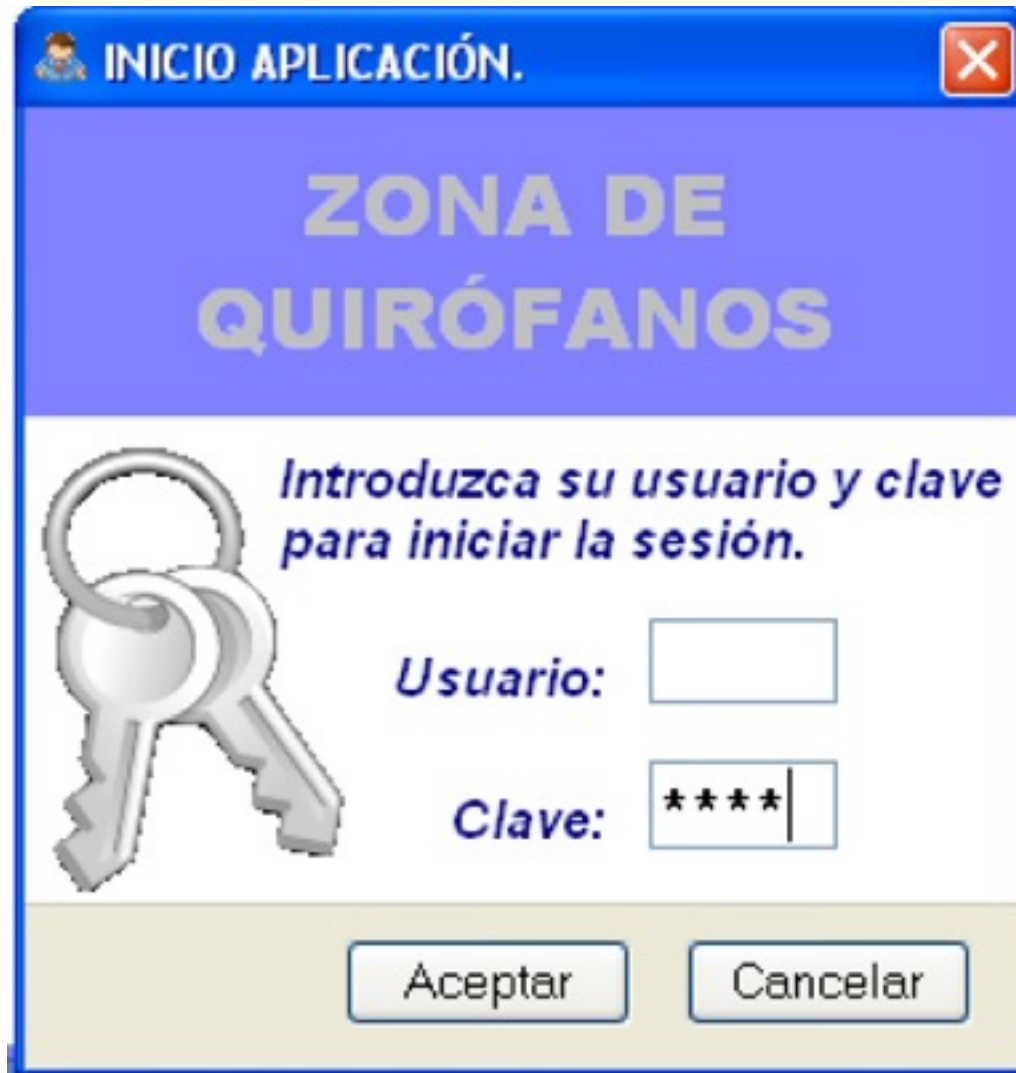

INICIO APLICACIÓN.

ZONA DE QUIRÓFANOS


Introduzca su usuario y clave para iniciar la sesión.

Usuario:

Clave:

Aceptar Cancelar

Paso 2- Una vez abierta la pantalla se selecciona Configuraciones → Material externo

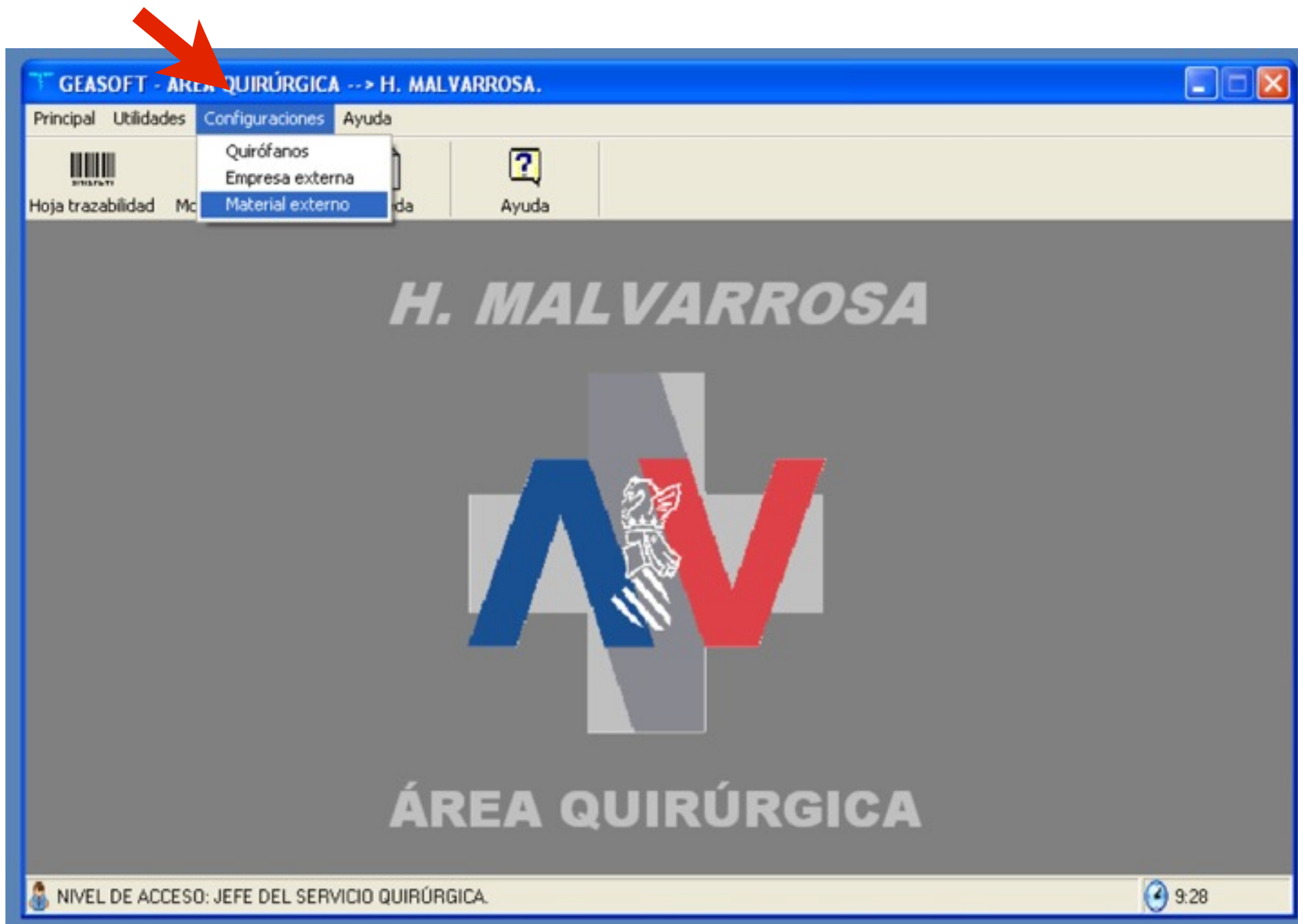

Paso 3- Aparecerá esta pantalla. Apretamos el botón de Nuevo que hay en la parte inferior izquierda

GEASOFT - CONFIGURACIÓN DE MATERIALES EXTERNOS.

Código EAN: Activado:

Descripción:

Empresa:

CODIGO	DESCRIPCION	
✓ 00613830159383	Absorbatack 5mm 20 grapas reabsorbi...	TYC
✓ 03607430007127	Anillo Zeiss 11 (Tensiobag)	IME
✓ 07612717012226	Anillos de iris	ALC
✓ 10613830124692	Antivaho	TYC
✓ 01084280970204	Aposito adhesivo OPER FILM	
✓ 07332430947697	Bata L-L	
✓ 07332551932046	Bata XL	
✓ 00757770457076	Bisturi oftalmoloaia 2.85 mm	BAL

✓ Activo ✗ Inactivo

Nuevo Definir Listado Aceptar Cancelar

ÁREA QUIRÚRGICA

NIVEL DE ACCESO: JEFE DEL SERVICIO QUIRÚRGICA. 9:29

Paso 4- Introducimos con el lector el código EAN (es el código de barras que tiene un (01) entre paréntesis. Si el producto tiene otro código de barras distinto del (01) no se puede usar)

GEASOFT CONFIGURACIÓN DE MATERIALES EXTERNOS.

Código EAN: 01107577704812 Activado:

Descripción:

Empresa:

CODIGO	DESCRIPCION	
✓ 00613830159383	Absorbatack 5mm 20 grapas reabsorbi...	TYC
✓ 03607430007127	Anillo Zeiss 11 (Tensiobag)	IME
✓ 07612717012226	Anillos de iris	ALC
✓ 10613830124692	Antivaho	TYC
✓ 01084280970204	Aposito adhesivo OPER FILM	
✓ 07332430947697	Bata L-L	
✓ 07332551932046	Bata XL	
✓ 00757770457076	Bisturi oftalmoloaia 2.85 mm	BAL

✓ Activo ✗ Inactivo

Nuevo Definir Listado Aceptar Cancelar

ÁREA QUIRÚRGICA

NIVEL DE ACCESO: JEFE DEL SERVICIO QUIRÚRGICA 9:34

Paso 5- Borrarnos del código EAN los dos primeros dígitos (corresponden al paréntesis, 01). En la pantalla aparece un símbolo de prohibición como que así este código no es correcto.

GEASOFT CONFIGURACIÓN DE MATERIALES EXTERNOS.

Código EAN: 01107577704812 Activado:

Descripción:

Empresa:

CODIGO	DESCRIPCION	
✓ 00613830159383	Absorbatack 5mm 20 grapas reabsorbi...	TYC
✓ 03607430007127	Anillo Zeiss 11 (Tensiobag)	IME
✓ 07612717012226	Anillos de iris	ALC
✓ 10613830124692	Antivaho	TYC
✓ 01084280970204	Aposito adhesivo OPER FILM	
✓ 07332430947697	Bata L-L	
✓ 07332551932046	Bata XL	
✓ 00757770457076	Bisturi oftalmoloaia 2.85 mm	BAL

✓ Activo ✗ Inactivo

Nuevo Definir Listado Aceptar Cancelar

ÁREA QUIRÚRGICA

NIVEL DE ACCESO: JEFE DEL SERVICIO QUIRÚRGICA. 9:35

Paso 6- Introducimos los dos últimos dígitos del código EAN. Al pulsar la tecla intro (↵) en la pantalla aparece un símbolo de OK como que así este código es correcto.

The screenshot displays the GEASOFT software interface for external material configuration. Two windows are shown, illustrating the process of validating the EAN code.

The top window, titled "GEASOFT - CONFIGURACIÓN DE MATERIALES EXTERNOS.", shows the EAN code "10757770481214" with a red prohibition sign, indicating it is incorrect. The "Activado" checkbox is checked.

The bottom window, titled "GEASOFT - CONFIGURACIÓN DE MATERIALES EXTERNOS.", shows the same EAN code "10757770481214" with a green checkmark, indicating it is correct. The "Activado" checkbox is checked.

The bottom window also displays a table of materials:

CODIGO	DESCRIPCION	
00613830159383	Absorbatack 5mm 20 grapas reabsorbi...	TYC
03607430007127	Anillo Zeiss 11 (Tensiobag)	IME.
07612717012226	Anillos de iris	ALC
10613830124692	Antivaho	TYC
01084280970204	Aposito adhesivo OPER FILM	
07332430947697	Bata L-L	
07332551932046	Bata XL	
00757770457076	Bisturi oftalmoloaia 2.85 mm	BAL

Buttons at the bottom of the window include "Nuevo", "Definir", "Listado", "Aceptar", and "Cancelar".

Paso 7- Seleccionamos con el ratón el campo de Descripción y anotamos el producto de que se trata. Si el producto ya está introducido y es una variación del mismo (por ejemplo solo varia la potencia en el caso de la lente o si es una sutura solo varía el tamaño del hilo) lo pondremos igual que el que ya esta introducido con el cambio de que se trate, por seguir un mismo formato.

The screenshot displays the 'GEASOFT - CONFIGURACIÓN DE MATERIALES EXTERNOS' dialog box. A red arrow points to the 'Descripción' field, which contains the text 'Lente B&L adapt-ao 22.5'. The 'Código' field contains '10757770481214' and is marked as 'Activado' with a green checkmark. Below the dialog box, a table lists various materials with their codes and descriptions.

CODIGO	DESCRIPCION	
✓ 10757770481160	Lente B&L adapt-ao 20	BAL
✓ 10757770481177	Lente B&L adapt-ao 20.5	BAL
✓ 05099110011490	Lente B&L adapt-ao 21	BAL
✓ 10757770481184	Lente B&L adapt-ao 21	BAL
✓ 10757770481191	Lente B&L adapt-ao 21.5	BAL
✓ 10757770481207	Lente B&L adapt-ao 22	BAL
✓ 10757770481214	Lente B&L adapt-ao 22.5	BAL
✓ 10757770481221	Lente B&L adapt-ao 23	BAL

Legend: ✓ Activo, ✗ Inactivo

Buttons: Nuevo, Definir, Listado, Aceptar, Cancelar

Background window: GEASOFT - ÁREA QUIRÚRGICA

Footer: NIVEL DE ACCESO: JEFE DEL SERVICIO QUIRÚRGICA. 9:38

Paso 8- Con el ratón se despliega el menú del apartado Empresa y se selecciona la empresa del producto. Posteriormente se le da Aceptar con el ratón y ya está introducido el producto.

GEASOFT - CONFIGURACIÓN DE MATERIALES EXTERNOS.

Código EAN: 10757770481214 Activado:

Descripción: Lente B&L adapt-ao 22.5

Empresa:

CODIGO	Empresa	Estado
✓ 10757770481	ALCON	Activo
✓ 10757770481	AMO	Activo
✓ 10757770481	ASPEN	Activo
✓ 05099110011	BAUSCH & LOMB	Activo
✓ 10757770481	BD	Activo
✓ 10757770481	BLOSS	Activo
✓ 10757770481	BRAUN	Activo
✓ 10757770481214	Lente B&L adapt-ao 22.5	Activo
✓ 10757770481221	Lente B&L adapt-ao 23	Activo

✓ Activo ✗ Inactivo

Nuevo Definir Listado **Aceptar** Cancelar

ÁREA QUIRÚRGICA

NIVEL DE ACCESO: JEFE DEL SERVICIO QUIRÚRGICA. 9:39